

ePM 10M/12M

Модульный монитор пациента

Эволюция практичности



Исходя из потребностей наших клиентов, в мониторах пациентов Mindray используются передовые технологии, предоставляющие доступные инновационные решения. Мониторы серии ePM обеспечивают отличную визуализацию, интеллектуальное управление, точные измерения физиологических параметров, бесперебойный рабочий процесс и полный комплекс возможностей сетевого взаимодействия для высоких требований таких отделений, как приемный покой, палаты пробуждения, отделения реанимации и интенсивной терапии.



Минималистичный дизайн



Емкостный сенсорный экран поддерживает управление жестами



Широкий угол обзора обеспечивает лучшее отображение



1280x800 пикселей (10,1"/12,1")
1366x768 пикселей (15,6")
высокое разрешение экрана



Автоматическая регулировка яркости уменьшает интенсивность света ночью



Безвентиляторная конструкция уменьшает риск перекрестного загрязнения



Прочный корпус выдерживает чистку с помощью 49 ведущих дезинфицирующих средств

Простота управления

Интеллектуальная работа

- Использование жестов, как при работе с планшетом
- доступ к наиболее распространенным функциям максимум за 2 шага
- Возможность быстрого обнаружения отсоединенных датчиков с помощью инновационной технологии AlarmSight
- Локировка экрана для легкой чистки



Непрерывный рабочий процесс

Основываясь на клинических данных, в мониторах ePM были оптимизированы рабочие процессы - доступна опция перелистывания между наиболее часто используемыми функциями и интерфейсами, что позволяет ускорить и сделать более точным решение клинических задач.



Мониторинг на расстоянии
Наглядные крупные цифры



Мониторинг у койки
Подсветка значений, выходящих за границы нормы



Обход палат или передача пациента
Быстрое указание на изменение состояния пациента



Просмотр и анализ
Просмотр кривых за 24 часа и тревог высокого приоритета

Точные и надежные параметры

Комплексный мониторинг

Параметры, встроенные в мультипараметрический модуль:
ЭКГ (3/5/12 отведений), дыхание, SpO₂, температура
и неинвазивное артериальное давление (НИАД).

- алгоритм ЭКГ с анализом по нескольким отведениям, анализом ST и QT
- алгоритм SpO₂ при низкой перфузии
- Быстрый, точный и устойчивый к движению алгоритм НИАД, утвержденный Британским обществом по борьбе с гипертонией (BHS)

Широкий диапазон измерений и защита от помех обеспечивают превосходную точность и надежность параметров.

Мониторы ePM также обеспечивают мониторинг дополнительных параметров: инвазивного артериального давления (4 канала), EtCO₂, сердечного выброса, анализ анестезиологических газов и BIS, что делает их незаменимыми для широкого спектра клинических условий.



Уменьшение ложных сигналов тревоги с CrozFusion™



Инновационный мультипараметрический анализ сигналов тревоги может уменьшить ложные сигналы тревоги по аритмии и повысить точность определения частоты сердечных сокращений и частоты пульса и, таким образом, повысить бдительность медперсонала.

↑ > 30%

Точность ЧСС
и частоты пульса

↓ 65%

Ложные сигналы тревоги
по летальной аритмии

↓ 50%

Ложные сигналы
тревоги по аритмии

*Результаты основаны на оценке Mindray мультипараметрической консолидированной базы данных.

Хранение большого объема данных непосредственно
в палате пациента

2400 ч

трендов каждые 10 минут

48 ч

развернутых кривых
всех параметров

3000 записей

измерений НИАД

2000 записей

событий

400 записей

событий
оксикардиореспираторы

* Максимальный объем памяти мониторов ePM с памятью 16 Гб.



Дополнительные клинические параметры

- Выдвижная модульная стойка поддерживает параметрические модули plug-and-play, совместимые с мониторами Mindray серии BeneVision N
- Благодаря эргономичному дизайну ручки при ее чистке нет невидимых участков



Широкий выбор вариантов крепления

- разнообразные варианты установки для различных клинических условий
- Механизм крепления позволяет быстро отсоединять монитор от настенного крепления или мобильной стойки для транспортировки



Клинические вспомогательные приложения (САА)

Мониторы ePM предлагают удобные вспомогательные клинические приложения (САА), помогающие в принятии безопасных и эффективных решений в отделениях реанимации и интенсивной терапии медицинского учреждения.



ST Graphic™



Шкала комы Глазго



Отчет ЭКГ за 24 часа

Безопасность новорожденных


Экран SpO₂

- Интуитивно понятная панель управления целями оксигенотерапии помогает снизить риск избыточного содержания кислорода в крови
- статистика SpO₂ за 24 часа помогает медицинскому персоналу оценить результаты терапии



ОхуCRG

- Эффективно идентифицирует апноэ недоношенных как событие ABD (апноэ, брадикардия, десатурация)
- Подробные записи событий помогают медицинскому персоналу быстро определить причину события

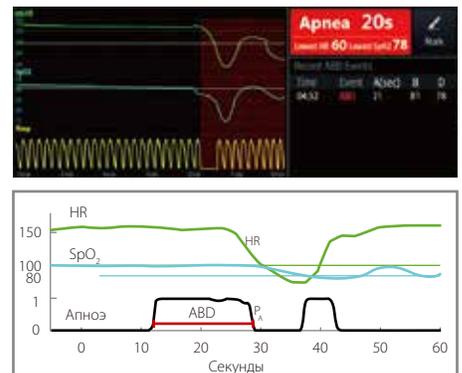

Шкала раннего предупреждения (EWS)

Мониторы Mindray ePM обеспечивают расчет по шкале раннего предупреждения, который помогает врачам отслеживать и документировать признаки ухудшения состояния пациентов и быстрее принимать клинические решения.

- отвечает протоколам национальной шкалы раннего предупреждения (NEWS), национальной шкалы раннего предупреждения 2 (NEWS2) и модифицированной шкалы раннего предупреждения (MEWS)
- Вы также можете создать пользовательские протоколы, отвечающие требованиям вашего учреждения
- Интуитивно понятный интерфейс и просмотр трендов помогает медицинским работникам быстрее увидеть необходимые данные
- Быстрый автоматический расчет EWS непосредственно в палате
- Отображение инструкций на экране, напоминающих медицинскому персоналу о необходимости принятия мер
- Интеграция с электронной медицинской картой (EMR) для быстрого и точного документирования жизненно важных показателей и EWS в электронном виде



Панель EWS на мониторах ePM



Полезные и доступные IT-решения


Мониторы Mindray ePM можно подключать к центральной станции мониторинга и eGateway как через проводную, так и через беспроводную сеть. С помощью протокола HL7 монитор может быть подключен напрямую к системе электронных медицинских карт (EMR).

Мониторы ePM помогают повысить эффективность клинической работы благодаря гибким и надежным возможностям подключения.

- функция просмотра данных других пациентов позволяет медицинским работникам просматривать данные до 12 других мониторов в режиме реального времени на одном экране ePM. Благодаря непрерывному обмену информацией между прикроватными мониторами медперсонал может просматривать данные всех пациентов одновременно без необходимости использования центральной станции мониторинга.
- функция Caregroup позволяет медицинскому персоналу просматривать данные своих пациентов на мониторах, подключенных к центральной станции мониторинга.

Данные мониторов ePM подключаются к центральной станции мониторинга и интерфейсу Mobile Viewer, предоставляя врачам доступ к информации пациента в любое время и в любом месте медицинского учреждения.

- Шкала раннего предупреждения (EWS) центральной станции обеспечивает интуитивно понятное отображение состояния пациента, а также информацию об изменениях в его состоянии, передавая данные в Mobile Viewer и предупреждая медицинский персонал о изменениях и потенциальном риске ухудшения состояния пациента.

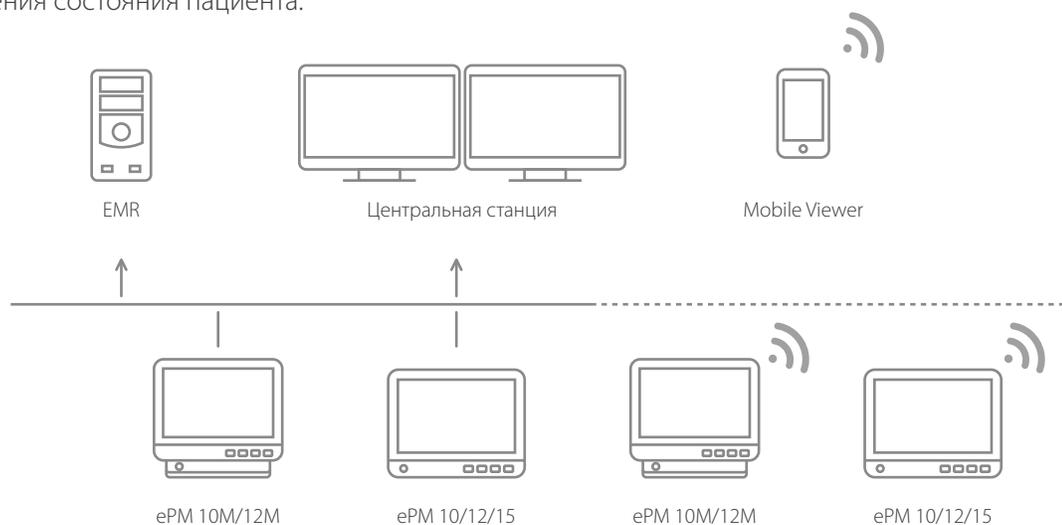

ePM 10M/12M

Модульные мониторы пациента



Ваш дилер оборудования Mindray



7 495 642 86 60



7 800 500 93 80



info@nv-med.ru



www.nv-med.ru